
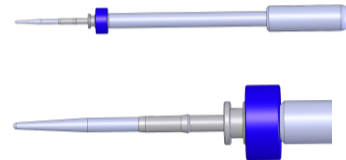


Trokar Set

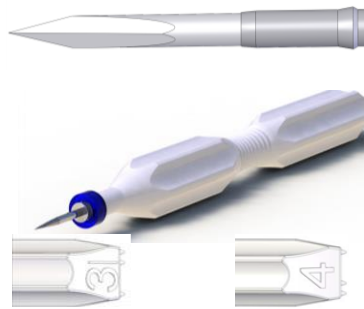

	Trokar Set 1 Step	Trokar Set 2 Step
Inhalt / Set:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Trokare mit Schließventil • 3 scharfe Insertere • Infusionsschlauch • 3 Verschlussstopfen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Trokare mit Schließventil, • 3 Insertere • Infusionsschlauch • 3 Verschlussstopfen
Durchmesser:	23 Gauge, 25 Gauge, 27 Gauge	20 Gauge, 23 Gauge
Material:	Trokare aus med. Edelstahl, Handgriffe aus Kunststoff	Trokare aus med. Edelstahl, Handgriffe aus Kunststoff
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare mit „Ridge“ gegen unbeabsichtigtes Herausziehen • sehr scharfe Klinge im „Stiletto“-Style • Limbusmarker am Ende des Griffes (3,0 & 4,0 mm) • selbstdichtende Schließventile • großlumiger Innenraum • ergonomisch optimierte Verjüngung am Handgriff unterstützt das Einbringen der Trokare ins Auge • Anwenderunterstützung beim Festlegen des Insertionspunktes anhand der 3 oder 4mm breiten Abstandsmarkierung (große Kennzeichnung am Handgriff) • der zum Ende hin verjüngende Handgriff vereinfacht die Sicht beim Festlegen des Insertionspunktes 	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare mit „Ridge“ gegen unbeabsichtigtes Herausziehen • dicht schließende Schließventile • großlumiger Innenraum <p>Das Diamatrix-Messer 2715KS (23ga, Vitrectomy Knife, full Handle, angewinkelt) kann für die Trokare verwendet werden. Dies ist nicht im Set vorhanden.</p>
VPE:	6 Sets/Box	6 Sets/Box
Artikelnummer:	23ga - W2O-2301 25ga- W2O- 2501 27ga- W2O- 2701	20ga - W2O-2002 23ga - W2O-2302

Kontakt:

W2O Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 11.07.2016

We care!