



Vacuklav 44B+ Evolution

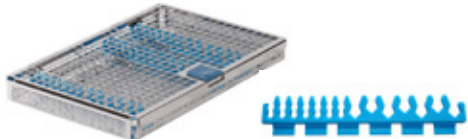
Die Autoklaven der Evolution-Serie bieten einerseits typische Features dieses Herstellers, wie Rekordbetriebszeiten, intuitives Bedienkonzept, integrierter Dokumentation und Freigabe. Darüber hinaus stehen jedoch auch einzigartige Innovationen zur Verfügung. So fokussiert sich dieses Gerät auf die Verbindung von noch kürzeren Betriebszeiten und damit schnellerer Verfügbarkeit der Instrumente mit der Energieeinsparung.

Optimale Sterilisationsergebnisse werden durch die patentierte Doppelmantel-Technologie erreicht.


Technische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Patentierte Trocknung DRYtelligence® mit automatischer Anpassung an die Beladung • 9 kg maximale Beladung • Halterungen für bis zu 8 Tablettts • Intuitive Bedienung über großes Farb-Touchdisplay • Integrierte Software zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung • Medienboard für schnellen Zugang zu wichtigen Komponenten, z. B. der Schnittstelle für den technischen Service • Sleep-Modus auf Knopfdruck aktivier- und deaktivierbar für weitere Reduzierung des Strombedarfs • Startzeitvorwahl • Leitwertmessung zum Schutz der wertvollen Instrumente vor Wasser schlechter Qualität • Festwasseranschluss • Kammertiefe 45 cm 				
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktioniertes Vor- und Nachvakuum • Festwasseranschluss • Kesselgröße Ø 25 cm x 45 cm Länge, 23 Liter Volumen • Maximale Beladungsmenge von 9 kg 				
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • (Breite x Höhe x Tiefe) 46 cm x 50 cm x 68 cm • Höhe inkl. Display 56 cm • Gerätefüße passen auf 70 cm breite Tischplatte 				
Gewicht	64 kg				
Stromversorgung	220-240V / 50-60 Hz / 3.400 W				
Bestelldaten	<table> <tr> <td>Vacuklav 44B+ Evolution</td> <td>Art.-Nr. 10040837</td> </tr> <tr> <td>Aufstellpauschale W20 MELAG</td> <td>Art.-Nr. 10040021</td> </tr> </table>	Vacuklav 44B+ Evolution	Art.-Nr. 10040837	Aufstellpauschale W20 MELAG	Art.-Nr. 10040021
Vacuklav 44B+ Evolution	Art.-Nr. 10040837				
Aufstellpauschale W20 MELAG	Art.-Nr. 10040021				

Zubehör für Vacuklav 44B+ Evolution

Für die Beladung des Vacuklav 44B+ Evolution steht eine Vielzahl an Zubehör zur Verfügung. So können beispielsweise MELASore Trays vom Autoklaven aufgenommen werden. Zur Instrumentenfixierung sind verschiedene Silikonzubehöre verfügbar.

	<p>MELASore Tray 100 - 01181 Lieferung mit drei Silikonstegen für bis zu 14 Instrumente mit einer Länge von 27 cm Breite: 17,6 cm x Länge: 27,5 cm x Höhe: 4,3 cm 1 Stück Art.-Nr. 10041643</p>
--	---

Zubehör für Sterilgutkassetten

	<p>Einmalcontainerfilter mit Indikator, 4-fach Lochbohrung und Druck, 3FCZB470511, 365 mm x 131 mm, passend für Sterilgutkassette 23M und 23G 100 Stück Art.-Nr. 10032340</p>
	<p>Deckeldichtungen für Container 23M 1180 mm, geklebte Version 1 Stück Art.-Nr. 10028805</p>